

VIDAS® KUBE™

UNSERE IMMUNOASSAY-LÖSUNG

Die Anforderungen Ihres Labors entwickeln sich ständig weiter. Um ein hohes Maß an Zufriedenheit zu gewährleisten, sind präzise und schnelle Ergebnisse noch am selben Tag wichtig.

Entdecken Sie die Einfachheit von VIDAS® KUBE™, einer absolut flexiblen und kosteneffizienten Plattform, die schnelle und zuverlässige Ergebnisse liefert. VIDAS® KUBE™ lässt sich problemlos erweitern und ist damit eine einfache und effiziente Ergänzung für Ihr Labor!

Full-HD-TOUCHSCREEN



EINFACHE IMPLEMENTIERUNG

Die Integration von VIDAS® KUBE™ in das Labor ist einfach und bietet Ihnen die folgenden Vorteile:

- Maximale Flexibilität - bis zu 36 Tests/Stunde pro Modul
- Modulares Benchtop-Design – 1-6 Module
- Minimaler Schulungs- und Installationsaufwand
- Integrierter Computer für bis zu 2 Module

ZUVERLÄSSIGE ERGEBNISSE

VIDAS® KUBE™ liefert dem Labor jederzeit zuverlässige und präzise Ergebnisse.

- Onboard-Riegel/Spitzen-Kompatibilitätsprüfung
- Optische Probenerkennung
- Warnmeldungen bei Problemen (Auslaufen/Verstopfung)
- Modulübergreifende Kalibrierung

VIDAS® KUBE™ ermöglicht eine einfache Anwendung:

- Intuitiv und einfach zu bedienende Benutzeroberfläche
- Bi-direktionale LIS²-Konnektivität
- Datensicherheit durch Cybersecurity-Schutz
- Vollst. Rückverfolgbarkeit (21CFR³, Audit Trail)

¹Quality Control VIDAS®

²Laborinformationssystem

³Code of Federal Regulations

GERÄTE-LED

ZWEI UNABHÄNGIGE
SEKTIONEN
FÜR BIS ZU 6 TESTS



AN-/AUS-SCHALTER

SEKTIONS-
BETRIEBSSTATUSANZEIGE

HOCHWERTIGER SERVICE

VIDAS® KUBE™ bietet langfristige Sicherheit durch:

- Aufeinander aufbauende und individuell anpassbare Schulungen
- Optimierte Produktivität durch Fernwartung über VILINK®
- Geringeren Wartungsaufwand (keine Notwendigkeit für QCV^{®1})

VIDAS® KUBE™ steigert die Produktivität, Präzision und Innovation Ihres Labors - mit einer einzigen, optimierten Plattform.



DAS VIDAS®-PRINZIP


EINZIGARTIGES EINZELTEST-PRINZIP

- ◆ Gebrauchsfertige Reagenzien mit langer Haltbarkeit
- ◆ All-in-One-Kit



UMFASSENDES TESTMENÜ MIT MEHR ALS 80 PARAMETERN

- ◆ Durch Studien nachgewiesene Zuverlässigkeit der Ergebnisse*
- ◆ VIDAS® bietet Test-Lösungen für folgende Bereiche:
 - Notfalldiagnostik
 - Immunochemie
 - Infektionskrankheiten

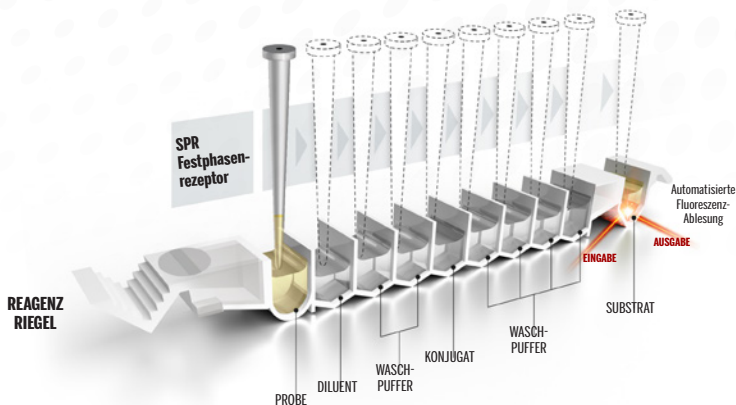

*Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren zuständigen Außendienstmitarbeiter.

ALLES RUND UM VIDAS®


Wir sind uns Ihrer **wachsenden Laboranforderungen** bewusst.

Deswegen ist es unser Ziel, Ihnen **einfache, langlebige** Lösungen mit hervorragendem Service zu bieten, um den reibungslosen Betrieb Ihres Labors zu gewährleisten.

Der VIDAS® KUBE™ ist so konzipiert, dass Sie all das beibehalten können, was Ihr Labor an der bewährten VIDAS®-Lösung schätzt, und Sie gleichzeitig **in den Genuss fortschrittlicher Technologie kommen**.

Durch die Zusammenarbeit mit bioMérieux profitieren Sie von unserer **über 30-jährigen** Erfahrung im Bereich der Immunoassay-Diagnostik.

INNOVATION SEIT ÜBER 30 JAHREN

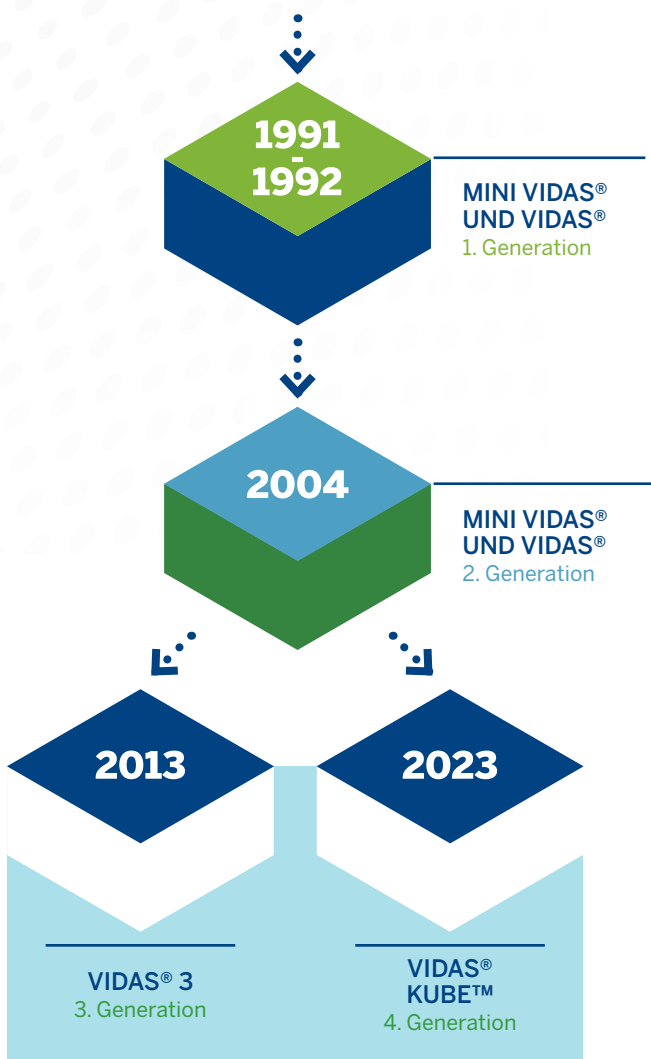



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

VIDAS® KUBE™ Referenzen	423 912 (Einzelgerät) 470 7576 (Standardkonfiguration)
Gewicht	23,7 kg (Einzelgerät)
Abmessungen	B 43,4 cm x H 32,1 cm x T 48,5 cm (Einzelgerät)
Netzspannung	100/240 V, 56-60 Hz
Leistung	150 W
Energieeffizienz	Standby-Modus; Programmierbare Startfunktion
Betriebstemperatur	18-30 °C
Feuchtigkeit	20-80 % relative Feuchtigkeit (nicht-kondensierend)
Maximale Höhe	2700 m
Geräuschpegel im Betriebsmodus	≤ 70 dBa
Benutzerfreundlichkeit	<ul style="list-style-type: none">• Datenbereinigung: Automatische Datenarchivierung• Anwendersicherheit während der Testung: Automatische Verriegelung der Sektionsklappen• Kalibrierungseinstellungen anpassbar

PC-Anforderungen

Für die Konfiguration des VIDAS® KUBE™ mit 3 bis 6 Modulen wird ein zusätzlicher PC benötigt.

Betriebssystem	Windows 10
CPU	Intel Core i3 – 8100 3.6 GHz
Speicher	27000 Testergebnisse ca. 5 Jahre an Daten
RAM	DDR4 - 16GB 2400 MHz
Anschlüsse	6 USB-Anschlüsse 1 Ethernet-Anschluss 1 Display-Anschluss (Bildschirm)

BIOMÉRIEUX

VIDAS® KUBE™

Enter a World of Simplicity

BEWÄHRT. ZUVERLÄSSIG. VIELSEITIG.



PIONEERING DIAGNOSTICS